

Hematologie

CADD™-Solis VIP-pomp voor thuisgebruik

U krijgt soms een **chemokuur** thuis via de CADD™-Solis VIP-pomp. Een arts schrijft het medicijn voor en een verpleegkundige stelt de pomp goed in. Zo krijgt u het medicijn op de juiste manier.

- **Vetgedrukte woorden** worden uitgelegd onderaan deze tekst.

De pomp gebruiken

Het is belangrijk dat u weet hoe de pomp werkt. Uw verpleegkundige geeft uitleg. Deze handleiding hoort bij die uitleg.

Lees eerst deze hele handleiding voor u de pomp gebruikt. Voer alleen handelingen uit waarover u uitleg kreeg. Zo voorkomt u problemen.

1. PROBLEMEN OPLOSSEN

Soms krijgt u te maken met een probleem met de pomp. Hieronder leest u wat u in verschillende gevallen kunt doen.

- Pomp in het water
 - Haal de pomp snel uit het water.
 - Droog de pomp met een handdoek.
 - Neem contact op met het ziekenhuis.
- Pomp gevallen of gestoten
 - Trek en draai voorzichtig aan de **cassette** om te voelen of die nog goed vast zit.
 - Controleer of het batterijklepje goed vastzit. Druk het klepje anders weer goed op de stang van de pomp.
 - Krijgt u een alarm of ziet u 'Help' op het scherm? Neem dan contact op met het ziekenhuis.
 - Zitten de pomp of het batterijklepje los of zijn deze kapot? Of blijft het alarm? Gebruik de pomp dan niet meer.
 - Sluit de **toedieningsslang** af met het plastic klemmetje.
 - Zet de pomp in de **STOP-stand**.
 - Waarschuw meteen het ziekenhuis.

Vragen of problemen

Heeft u vragen of werkt de pomp niet goed? Bel dan:

- AKZI, telefoonnummer 020 - 444 19 59
- Verpleegafdeling Hematologie, telefoonnummer 020 - 444 22 90 (9b)
- Verpleegafdeling Hematologie, telefoonnummer 020 - 444 21 90 (9c)


In het weekend of 's nachts belt u de verpleegafdeling Hematologie.

2. DE POMP

Vooraanzicht



Achteraanzicht

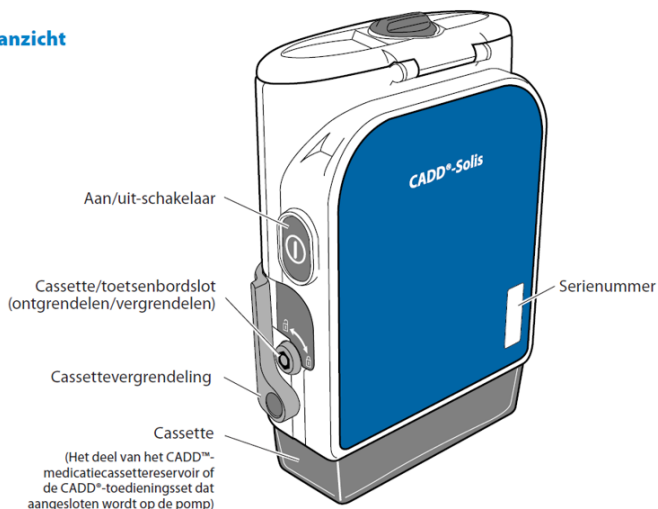

Bron: © 2025 Copyright ICU Medical Inc. or its Affiliates. All rights reserved

Lampjes en scherm van de pomp

De pomp heeft lampjes en een scherm. Ze geven informatie over hoe de pomp werkt.



- Gegevens over uw behandeling
- Statusbalk pomp. In dit gedeelte kunnen berichten of waarschuwingen worden weergegeven.
- Huidig reservoirvolume
- Toedieningsstatus van de pomp: gestopt of loopt
- Het type batterij dat wordt gebruikt, de geschatte hoeveelheid resterende levensduur van de batterij en de indicator voor gebruik van de AC-adapter



AA-batterijen



AA-batterijen met AC-adapter



Herlaadbare batterij



Herlaadbare batterij met AC-adapter

- Vergrendelingsstatus toetsenbord: vergrendeld of ontgrendeld
- Schermnaam en helptekst, indien aanwezig
- Werkgebied/-inhoud voor het weergegeven scherm

- Groen lampje knippert als de pomp werkt en u medicijn krijgt.
- Geel lampje knippert als de pomp stopt, zoals bij een alarm of als de batterij bijna leeg is.
 - Blijft het lampje branden? Gebruik de pomp dan niet meer en bel het ziekenhuis.
- Heel soms **knippen beide lampjes**. Dan is er iets met de pomp, bijvoorbeeld een bijna lege batterij of weinig medicijn over.
- Het scherm laat alles zien. Het scherm schakelt vanzelf uit om energie te besparen. Druk op een toets om het aan te zetten.

Schakelt de pomp uit?

- U krijgt het medicijn dan niet meer.
- Alarmpiepjes werken niet.
- Het scherm is leeg.
- Knoppen werken niet.
- Geen lampjes branden.

Stroom voor de pomp

U krijgt de pomp volgeladen uit het ziekenhuis. De pomp werkt op:

- 4 nieuwe AA 1,5 volt batterijen.
- CADD™-Solis VIP-herlaadbare batterijen. Deze laadt u op met de **AC-adapter** die u van het ziekenhuis krijgt. Gebruik geen andere batterijen of adapter: dit kan gevaarlijk zijn. Gaat opladen niet goed of denkt u dat er iets mis is met de batterijen? Bel dan het ziekenhuis.

De AC-adapter sluit u aan op de aansluiting met '7V'.

- Gaat het **blauwe lampje branden**? Dan is de adapter goed aangesloten.
- Staat de **pomp aan**? Dan ziet u 'AC-adapter aangesloten' op het scherm.

Storing aan de pomp

Soms kunnen draadloze apparaten storingen geven bij de pomp. Zet deze apparaten weg uit de buurt van de pomp. De pomp mag niet mee tijdens een **MRI**- of **ECG**-onderzoek of bij **radiotherapie**.

Alarmen en berichten

De pomp heeft verschillende soorten waarschuwingen. Soms hoort u een geluid of ziet u een gekleurd scherm.

Alarmen herkent u met verschillende kleuren:

- Rood scherm en 4 belletjes: er is een groot probleem. Neem contact op met het ziekenhuis.
- Rood scherm en 3 belletjes: het alarm blijft totdat u op een toets drukt of het probleem is opgelost. De pomp stopt altijd met toedienen.
- Oranje scherm: u krijgt het medicijn. Het alarm gaat weg als het probleem is opgelost.
- Blauw scherm: kort signaal, daarna werkt alles weer als u op een toets drukt.

Soms ziet u hulpplaatjes op het scherm, bijvoorbeeld 'knik in slang'.



Bron: © 2025 Copyright ICU Medical Inc. or its Affiliates. All rights reserved

3. DE POMP SCHOONMAKEN EN BEWAREN

Hoe verzorgt u de pomp?

- Zorg dat de pomp droog blijft.
 - Neem de pomp niet mee onder de douche of in bad. Krijgt de pomp toch water? Droog hem dan goed af. Met de pomp mag u niet zwemmen of naar de sauna.
- Bescherm de pomp tegen stoten of vallen, daardoor gaat hij langer mee.
- Voorkom kou en hoge temperatuur: gebruik de pomp alleen tussen 2 en 40 °C.
- Gebruik geen schuurmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen. De pomp kan dan kapot gaan.

De pomp controleren

U controleert 2 keer per dag of alles goed werkt met de pomp.

- Controleer het scherm en kijk of het getal bij reservevolume lager wordt.
- Kijk of het zakje met het medicijn leger wordt.
- Zorg dat de toedieningsslang niet knikt of onder spanning staat.
- Controleer of de toedieningsslang niet lekt.
- Controleer of de cassette goed vastzit.

Pijn bij de insteekplaats

Heeft u pijn bij de insteekplaats, of andere problemen? Neem dan contact op:

- AKZI, telefoonnummer 020 - 444 19 59
- Verpleegafdeling Hematologie 9b, telefoonnummer 020 - 444 22 90
- Verpleegafdeling Hematologie 9c, telefoonnummer 020 - 444 21 90

In het weekend en 's nachts belt u de verpleegafdeling Hematologie.

Uitleg van medische woorden

1. **Chemokuur:** behandeling met medicijnen tegen kanker.
2. **Cassette:** onderdeel van de pomp waarin het zakje met het medicijn zit.
3. **Toedieningsslang:** slang waar het medicijn door gaat naar uw lichaam.
4. **STOP-stand:** stand waarmee u de pomp stopt.
5. **Herlaadbare batterijen:** batterijen die u opnieuw kunt opladen.
6. **AC-adapter:** stekker waarmee u een apparaat oplaadt.
7. **MRI:** manier om heel duidelijke fot's te maken van de binnekant van het lichaam.
8. **ECG:** onderzoek waarbij de het werken van uw hart wordt gemeten.
9. **Radiotherapie:** behandeling tegen kanker met radioactieve straling.